


Opt-Diss 410

UV de fibra óptica in situ para ensayos de disolución

Opt-Diss 410 lleva la medición de disolución directamente al vaso, eliminando el muestreo manual o automatizado y los consumibles, mano de obra y análisis fuera de línea asociados. El sistema mueve luz en vez de líquidos y permite recopilación de datos cercana a tiempo real con puntos de muestra cada cinco segundos.

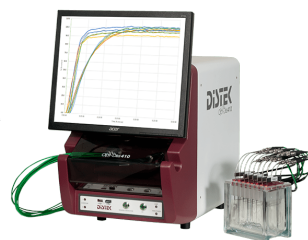

Características documentadas

Ensayo simple y eficiente La recopilación y el análisis automatizados permiten completar el ensayo desde el inicio hasta el informe en tiempo real, sin interacción del operador.	Medición UV in situ Mide directamente en el vaso y elimina el muestreo manual o automatizado. Las sondas ARCH patentadas se diseñaron para ensayos de disolución con efecto hidrodinámico despreciable.
Variprobe La sonda de inmersión Variprobe de longitud de paso ajustable, pendiente de patente, cambia entre 2, 5, 10 y 20 mm para adaptarse a diferentes concentraciones de muestra.	Análisis multicomponente Mide dos componentes en el mismo ensayo sin LC, incluidos productos con dos API o interacciones con excipientes, recubrimientos o cápsulas que alteren los espectros UV.
Paquete de software único El fabricante indica cumplimiento de 21 CFR Parte 11 y un único paquete de software que controla el sistema completo de disolución por fibra óptica UV.	Datos rápidos La adquisición puede realizarse cada 5 segundos en todos los vasos para perfiles de disolución cercanos a tiempo real.

Especificaciones

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Cumplimiento de 21 CFR Parte 11	Sí.
Fuente de luz	Lámpara de deuterio.
Detector	Detector CCD de grado científico optimizado para UV.
Rango UV	200–405 nm $\pm$ 5 nm.
Exactitud de longitud de onda	$\pm$ 2 nm o mejor.
Capacidad de canales	Hasta 12 canales.
Sondas	Sondas ARCH, Variprobes y sondas de inmersión.
Longitud de paso ARCH	0,25; 0,5; 1; 2; 5 y 10 mm.
Longitud de paso Variprobe / inmersión	2; 5; 10 y 20 mm.
Recolección de espectros	Tan rápida como cada 5 segundos.
Rango de absorbancia	0–2,0 AU.
Luz parásita	< 1 %.
Ruido de corto plazo	$\pm$ 0,002 AU, 100 segundos a 250 nm.
Ruido de largo plazo	$\pm$ 0,005 AU, 1 hora a 250 nm.
Control de instrumento de disolución	Distek Model 2500 / 2500 RTD / 2500 Select, Evolution 6100 / 6300 y symphony 7100, con software Rev. 2.00 o superior.
Compatible con la mayoría de instrumentos de disolución	Sí.
Temperatura de laboratorio	Mín. / máx.: 20 °C / 25 °C.
Humedad de laboratorio	Mín. / máx.: 20 % / 80 % de humedad relativa.
Alimentación eléctrica	115–230 V $\pm$ 15 V, 50/60 Hz, 10 A; preajustado de fábrica para un rango.
Peso y dimensiones	25 kg; 33 × 57 × 56 cm.